

Для корректного подбора бандажа Orlett, арт. SI-301 необходимо измерить сантиметровой лентой (плотно, но не утягивая) окружность грудной клетки вместе с прижатой к грудной клетке рукой (рис. 13).

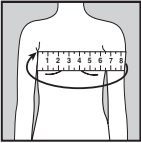


рис. 13

Таблица подбора размеров:

Размер бандажа Orlett, арт. SI-301	Окружность грудной клетки с прижатой рукой (см)
S/M	До 100
L/XL	Свыше 100

ВНИМАНИЕ!

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез/бандаж Orlett. Важно, чтобы ортез/бандаж Orlett был удобен.

Правила ухода:

Ручная стирка при температуре не выше +40°C. Не применять хлорсодержащие моющие и отбеливающие средства. Не применять машинную стирку. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Состав изделия:

Ортез Orlett, арт. SI-311: 30% полиэстер, 8% нейлон, 60% пенополиуретан, 2% кулмакс.
Бандаж Orlett, арт. SI-301: 40% полиуретановый поролон, 25% нейлон, 20% полиэстер, 15% хлопок.

Условия хранения:

Ортез/бандаж должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.



Условия утилизации:

Ортез/бандаж утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности:

Срок годности не установлен. Возможность использования ортеза/бандажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза/бандажа без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза/бандажа. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза/бандажа.

Комплектность:

Ортопедическое изделие арт. SI-311, инструкция по применению.
Ортопедическое изделие арт. SI-301, инструкция по применению.

Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи ортеза/бандажа при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09551 от 30.12.2011 г. выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Декларация о соответствии № РОСС DE.ИМ32.Д00175 от 11.01.2012 г. выдана ЗАО «Центр Экспертизы Качества»

Зарегистрировано в ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РУ № ФСЗ 2011/09549 от 12.04.2011 г. Декларация о соответствии № РОСС DE.ИМ24.Д00208 от 15.04.2011 г.

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 04316, Лейпциг, Херманн-Сандер штрассе 27.
Импортёр: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 1.
Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я № 60.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ФС ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ



Инструкция по применению
ортопедических изделий



Ортез на плечевой сустав и руку

SI-311

Бандаж на плечевой сустав

SI-301

Medical Line



Арт. INTOK-SI-301/SI-311-N2_02/12

Свойства товара (оказываемые эффекты):

Ортез Orlett на плечевой сустав и руку (фиксирующий ортез на плечевой пояс), арт. **SI-311** применяется для фиксации плечевого сустава в положении небольшого (10-15°) отведения. Конструкция позволяет использовать ортез как на левую, так и на правую руки. Мягкий материал airvelvet обеспечивает комфорт при длительном ношении ортеза. Бандаж Orlett на плечевой сустав, арт. **SI-301** широко применяется для иммобилизации верхней конечности. В зависимости от сборки бандажа (с фиксацией к туловищу или без) оказывает поддержку руки или поддержку руки с фиксацией к туловищу.

Показания к применению ортеза Orlett, арт. SI-311:

- иммобилизация при переломах хирургической шейки плеча с незначительным смещением, головки плеча и суставного конца лопатки, тела лопатки;
- состояния после вправления вывиха плечевой кости;
- состояния после операций на плечевом суставе;
- состояния после остеосинтеза ключицы или плеча, нуждающиеся во временной послеоперационной иммобилизации;
- артрозы, артриты;
- параличи верхних конечностей;
- плекситы, невриты.

Показания к применению бандажа Orlett, арт. SI-301:

- ушибы, вывихи и переломы плеча и локтевого сустава, неосложненные переломы ключицы;
- парезы и параличи верхней конечности;
- острые и хронические воспалительные заболевания суставов верхней конечности (артриты и артрозы плечевого сустава, плече-лопаточные периартриты);
- реабилитация после травм и оперативных вмешательств на верхней конечности.

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения ортеза/бандажа назначает лечащий врач.

Противопоказания:

Локальные (в области применения ортеза/бандажа) дерматиты и гнойничковые инфекции кожи.

Предупреждения:

- людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием ортеза/бандажа необходимо проконсультироваться у врача;
- людям с чувствительной кожей следует надевать ортез/бандаж на майку с длинным рукавом;
- при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего применения ортеза/бандажа.

Применение ортеза Orlett на плечевой сустав и руку, арт. SI-311

Конструкция ортеза:

Цифры на рис. 1, 2 и 3. соответствуют следующим элементам конструкции:

1. Муфта на плечевой сустав и руку с фиксирующим поясом.
2. Валик-подушка (рис. 7).
3. Фиксирующий элемент на руку.
4. Ремень, фиксирующий положение плеча.
5. Ремень, фиксирующий положение кисти. При необходимости можно использовать этот ремень для фиксации положения локтевого сустава.
6. Застежка-липучка «Велкро» для фиксации пояса муфты на плечевой сустав и руку (рис. 3).
7. Застежка-липучка «Велкро» для фиксации руки в муфте (рис. 3).

Порядок надевания:

1. Наложить муфту (1) на область плечевого сустава (рис. 4)
2. Зафиксировать сбоку пояс муфты съемными застежками-липучками «Велкро» (6) (рис. 5).
3. Расположить в муфте руку и зафиксировать ее в нужном положении с помощью застежек-липучек «Велкро» (7) (рис. 6).
4. Подложить валик-подушку (2) под плечо (рис. 7).
5. Дополнительно зафиксировать положение руки при помощи фиксирующего элемента на руку (3) (рис. 8).
6. Зафиксировать положение плеча при помощи ремня (4), фиксирующего положение плеча (рис. 9).

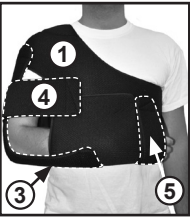


рис. 1



рис. 2

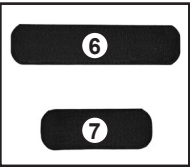


рис. 3

7. При необходимости зафиксировать положение кисти при помощи фиксирующего ремня (5) (рис. 1).

ВАЖНО: изделие универсальное (для правой и левой руки). Изделие упаковано для правого плечевого сустава и руки. При необходимости лечения левого плечевого сустава необходимо вывернуть муфту на другую сторону.



рис. 4



рис. 5



рис. 6



рис. 7



рис. 8



рис. 9

Применение бандажа Orlett на плечевой сустав, арт. SI-301

Конструкция бандажа:

Цифры на рис. 10 соответствуют следующим элементам конструкции:

1. Опорная муфта бандажа.
2. Наплечные ремни с фиксирующими застежками-липучками «Велкро».
3. Фиксирующий пояс.
4. Трехлепестковые застежки-липучки «Велкро» (рис. 11).



рис. 10

Порядок надевания:

1. Наплечные ремни (2) закрепить на опорной муфте (1) с помощью застежек-липучек «Велкро» (4).
2. Отрегулировать длину наплечных ремней (2) так, чтобы при укладывании руки в муфту угол локтевого сгиба составил 90°, если иное расположение руки не предписано врачом. При необходимости ремни можно укоротить, для чего необходимо отлепить жесткую часть липучки «Велкро» (4) и отрезать ножницами лишнюю длину наплечных ремней.
3. Предплечье расположить в опорной муфте. Два наплечных ремня (2) перекрестить на спине и зафиксировать спереди на муфте с помощью застежек-липучек «Велкро».
4. Руку, при необходимости, зафиксировать к туловищу с помощью фиксирующего пояса с застежкой «Велкро» (3).



рис. 11

Правила подбора:

Для корректного подбора ортеза Orlett, арт. SI-311 необходимо измерить сантиметровой лентой (плотно, но не утягивая) окружность грудной клетки на уровне подмышечных впадин (рис. 12). Согласно полученным результатам подобрать ортез Orlett по таблице подбора размеров.

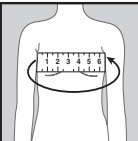


рис. 12

Таблица подбора размеров:

Размер ортеза Orlett, арт. SI-311	Обхват груди (см)
XS	72-81
S	81-89
M	89-97
L	97-105
XL	105-113
XXL	113-122