



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ПОД ГОЛОВУ ДЕТСКАЯ
(ОТ 5 ДО 18 МЕСЯЦЕВ)
TRELAX® SWEET**

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ
РУ №ФСР 2009/04606

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	1
2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.....	2
3. ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ.....	2
4. ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.....	2
5. ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДУШЕК.....	2
6. СПОСОБ ПОДБОРА.....	3
7. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
8. СОСТАВ.....	3
9. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	3
10. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.....	4
11. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ.....	5
12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	6
13. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.....	6
14. СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	6
15. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.....	7
16. РЕКОМЕНДУЕМ TRELAX®.....	8

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА TRELAX® **SWEET** МЯГКО ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОЛОВУ И ШЕЮ РЕБЕНКА, УМЕНЬШАЕТ НАГРУЗКУ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА И СНА, МАССИРУЕТ МЫШЦЫ ШЕИ, СПОСОБСТВУЕТ УЛУЧШЕНИЮ КРОВООБРАЩЕНИЯ МОЗГА, ДЕЛАЕТ СОН РЕБЁНКА ЛЁГКИМ И СПОКОЙНЫМ.



Наименование	Артикул	Размер, см
SWEET	П09, SWEET	25x30x6(4)

Показания к применению

- ☰ Поддержка шейного отдела позвоночника у недоношенных и ослабленных детей.
- ☰ Нормализация мышечного тонуса шейного отдела и плечевого пояса.
- ☰ Профилактика развития асимметрии головы.
- ☰ Реабилитация при функциональной кривошее.
- ☰ Реабилитация после родовой травмы.

Лечебные эффекты

- ☰ Фиксация шейного отдела и головы в физиологически правильном положении.
- ☰ Расслабление мышц шеи.
- ☰ Оптимальная поддержка мышц шеи.
- ☰ Устранение дисбаланса в мышцах шеи и верхнегрудного отдела позвоночника.

Ограничения и противопоказания к применению

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено. Не рекомендуется использование подушки в возрасте до 5 месяцев. Повышенная чувствительность к материалам наволочек подушки может быть причиной ограничения использования подушки.

Преимущества подушки TRELAX® SWEET

- ☰ Пенополиуретан — абсолютно гипоаллергенный материал, не накапливающий аллергены (домашняя пыль).
- ☰ Пенополиуретан гарантированно сохраняет форму в течение 2-х лет.
- ☰ Перфорированная основа подушки обеспечивает нормальное кожное дыхание, оптимизирует теплообмен и уменьшает вероятность появления «потницы» на коже головы ребенка.
- ☰ В комплекте с подушкой предоставляется съемная наволочка.
- ☰ Чехол подушки и съемная наволочка выполнены из 100% хлопка.
- ☰ Лёгкость ухода за подушкой.

Способ подбора

Подушка SWEET имеет универсальный размер и не требует специального подбора.

Способ применения

Подушку размещают под головой во время сна так, чтобы шейный отдел позвоночника располагался на маленьком валике подушки, а голова — в углублении подушки.



Состав

Подушка: эластичный пенополиуретан с перфорацией.

Чехол: 100% хлопок.

Наволочка: 100% хлопок.

Комплектность

Подушка в чехле, съемная наволочка, полиэтиленовый пакет, коробка, инструкция по применению.

Уход за изделием

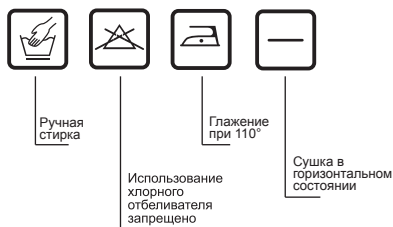
Уход за наволочкой:

- ☺ Наволочку, отдельно от подушки, можно подвергать машинной стирке при температуре 40°C (деликатный режим).
- ☺ Не использовать отбеливатели и органические растворители.
- ☺ Сушить в естественных условиях.
- ☺ Глажение при температуре 110°C.




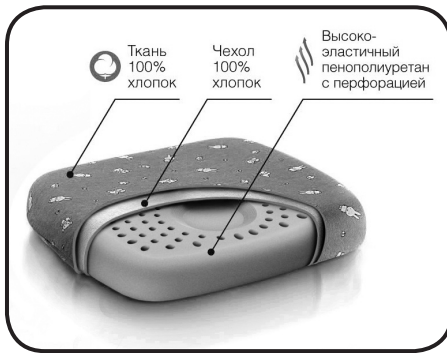
Уход за подушкой в чехле:





- ☺ Ручная стирка. Максимальная температура стирки не более 40°C.
- ☺ Выжимать руками, не выкручивать. Сушка естественная, горизонтальная в расправленном виде.
- ☺ Сушить вдали от нагревательных приборов. Не подвергать воздействию солнечных лучей.
- ☺ Не использовать отбеливатели и органические растворители.
- ☺ Глажение при температуре 110°C.



Характеристика материалов

- 
Эластичный пенополиуретан изготавливается методом горячего формования. Благодаря этому подушка имеет качественную ровную поверхность и правильную симметричную форму. Эластичный пенополиуретан мягко и надежно поддерживает голову и шею ребенка. Пористая структура обладает термоизолирующими свойствами, помогающими сохранить оптимальную температуру. Пенополиуретан нетоксичен и гипоаллергенен, в нем не заводятся микробы-паразиты.



- 
Подушка SWEET по всей поверхности основания имеет сквозную перфорацию, обеспечивающую свободный воздухообмен и поддержку комфортной температуры во время сна.
- 
Подушка SWEET помещается в трикотажный чехол из хлопка.
- 
Для изготовления наволочки используется трикотажная хлопчатобумажная ткань, рекомендованная для производства нательной одежды для детей. Ткань обладает гипоаллергенными свойствами и не накапливает статическое электричество.
- 
Сочетание всех свойств материалов позволяет ортопедической подушке SWEET обеспечить спокойный и здоровый сон вашего ребенка.

Гарантийные обязательства

- ☰ Гарантийный срок на подушку: 2 года со дня продажи.
- ☰ Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки.
- ☰ Во время эксплуатации возможно снижение высоты валика в местах повышенной нагрузки. Полное восстановление высоты валика происходит в течение 10-16 часов. Допускается остаточное уменьшение высоты валика до 5 мм относительно краев валика.
- ☰ В период привыкания к подушке возможно дискомфортное ощущение, которое обычно проходит в течение 1-2-х недель.
- ☰ Гарантия на наволочку: 6 месяцев со дня продажи.
- ☰ Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.
- ☰ Перед началом использования изделия необходимо снять с подушки наволочку и постирать ее.
- ☰ Пенополиуретан — дышащий материал, который может впитать посторонние запахи при транспортировке, хранении, использовании. В случае выявления запаха, необходимо проветрить подушку на свежем воздухе в течение 24 часов.
- ☰ Для предотвращения деформации подушку нужно использовать на ровной поверхности, не скручивать, не складывать.
- ☰ Срок службы: не менее 2-х лет.
- ☰ При использовании подушки свыше срока службы возможна деформация изделия и снижение лечебного эффекта.
- ☰ Эксплуатация согласно инструкции обеспечит максимально эффективное и безопасное использование подушки SWEET.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей.

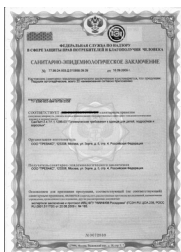
Способ утилизации

Вместе с бытовым мусором.

Подушка ортопедическая TRELAX® под голову детская
(от 5 до 18 месяцев), арт. П09, SWEET
ТУ № 9396-003-88419706-2008
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ24.В02543



Санитарно-эпидемиологическое заключение
№77.99.24.933.Д.010858.09.09



Зарегистрировано в Минздравсоцразвития РФ
РУ №ФСР 2009/04606



Рекомендуем

**ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ МАТРАЦ
TRELAX® ДЛЯ ДЕТЕЙ**

способствует правильному развитию опорно-двигательного аппарата ребенка, предупреждает развитие нарушений осанки, сколиозов. Ежедневное применение ортопедических матрасов для детей обеспечивает нормальное положение позвонков и нормализует мышечный тонус, предотвращает развитие гипертонуса мышц.

**ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ПОДУШКА-КОНСТРУКТОР
TRELAX® BABY COMFORT**

обеспечивает правильное положение позвоночника ребёнка во время сна и кормления, предотвращает травмы и падения. Подушка BABY COMFORT способствует правильному формированию изгибов позвоночного столба, с младенческого возраста предотвращает развитие сколиоза.

Рекомендуем

**ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА
ПОД ГОЛОВУ СТАНДАРТНАЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 3-Х ЛЕТ
TRELAX® ОПТИМА BABY**

используется для профилактики заболеваний шеи, формирования и поддержания правильного изгиба шейного отдела позвоночника, в период реабилитации после травм шейного отдела позвоночника, при повышенном тонусе мышц шеи и верхней части спины (включая кривошею), в случае нестабильности позвонков шейного отдела позвоночника, при наличии признаков остеохондроза в детском и подростковом возрасте. Подушка предназначена для использования детьми с длиной надплечья от 7 до 9 см.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ



Производитель:

ООО «ТРЕЛАКС», Россия, 123308, Москва, ул. Зорге, д. 5, стр. 4.
www.trelaxorto.ru

Дата изготовления и упаковывания:

Арт. INTTC-П09-N2