



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДУШКА ПОД ГОЛОВУ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ
TRELAX® BAMBINI



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	2
2. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	3
3. ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДУШКИ TRELAX BAMBINI.....	3
4. СОСТАВ И КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	3
5. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.....	4
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ.....	5
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	5
8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.....	6
9. СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	6
10. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.....	7
11. РЕКОМЕНДУЕМ TRELAX.....	8

Подушка под голову TRELAX **BAMBINI** предназначена для использования во время сна и дневного отдыха для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с длиной надплечья от 4,5 см. Анатомическая форма, повторяющая изгибы шейного отдела позвоночника, сочетание жёсткости и плотности подушки, создают оптимальные условия для комфорта ребёнка, улучшают качество и глубину сна.




**ВЫСОТА ВАЛИКОВ 4,5 И 6 СМ
(ОТ 1,5 ДО 3-Х ЛЕТ)**

Наименование	Артикул	Размер, см
BAMBINI	П22	27х38х6(4,5)

Правила использования

Подушку BAMBINI размещают во время сна так, чтобы шейный отдел позвоночника располагался на валике подушки.

В возрасте 1,5 года для сна нужно использовать меньший валик, высотой 4,5 см. По мере роста ребёнка необходимо менять валик, располагающийся под шеей, на более высокий (6 см). Рекомендуется использовать более высокий валик при увеличении длины надплечья ребёнка свыше 5,5 см.

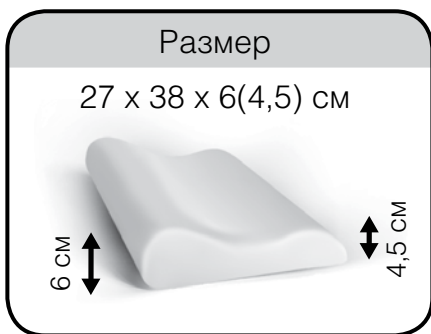

Преимущества подушки TRELAX BAMBINI

- Оптимальная высота валиков (4,5 и 6 см) для поддержки шеи ребёнка во время сна.
- Оптимальная высота основания подушки для удобного расположения головы и поддержания физиологически правильного соотношения положения головы и шеи.
- Оптимальные размеры подушки (27 x 38 см).
- Наволочка из высококачественного 100% хлопка.
- Лёгкость ухода за подушкой.

Состав и комплектность

Подушка: высокоэластичный пенополиуретан с перфорацией.

Чехол: 100% хлопок.


Наволочка: 100% хлопок.

Подушка в чехле, съёмная наволочка, полиэтиленовый пакет, коробка, инструкция по применению.

Уход за изделием

Уход за наволочкой:

- Наволочку, отдельно от подушки, можно подвергать машинной стирке при температуре не более 40°C (деликатный режим).
- Не использовать отбеливатели и органические растворители.
- Сушить в естественных условиях.
- Утюжка при температуре 110°C.

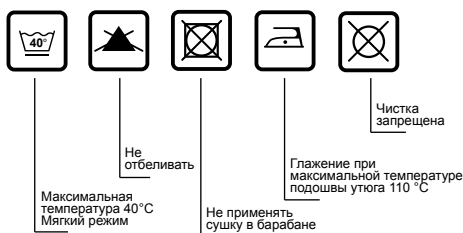

Уход за подушкой в чехле:


- Ручная стирка. Максимальная температура стирки не более 40°C.
- Выжимать руками, не выкручивать. Горизонтальная сушка в расправленном виде при комнатной температуре.
- Сушить вдали от нагревательных приборов. Не подвергать воздействию солнечных лучей.
- Не использовать отбеливатели и органические растворители.
- Утюжка при температуре 110°C.



Характеристики материалов

- Высокоэластичный пенополиуретан изготавливается методом горячего формования. Благодаря этому подушка имеет качественную ровную поверхность и правильную симметричную форму.
- Высокоэластичный пенополиуретан мягко и надежно поддерживает голову и шею ребенка. Пористая структура обладает термоизолирующими свойствами, помогающими сохранить оптимальную температуру.
- По всей поверхности основания подушка BAMBINI имеет сквозную перфорацию, обеспечивающую свободный воздухообмен и поддержку комфортной температуры во время сна.
- Подушка BAMBINI находится в трикотажном чехле из хлопка.
- Для изготовления наволочки используется трикотажная хлопчатобумажная ткань, рекомендованная для производства нательной одежды для детей.

Сочетание всех свойств материалов позволяет подушке BAMBINI обеспечить спокойный и здоровый сон вашего ребенка.

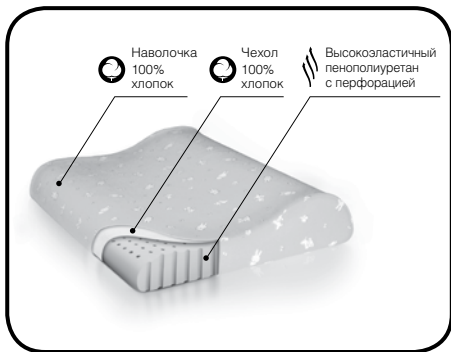

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на подушку — 2 года со дня продажи.
- Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки.
- Во время эксплуатации возможно снижение высоты валика в местах повышенной нагрузки. Полное восстановление высоты валиков происходит в течение 10-16 часов. Допускается остаточное уменьшение высоты валиков до 5 мм относительно краев валика.

- Период привыкания к подушке может составить 1-2 недели.
- Гарантия на наволочку — 6 месяцев со дня продажи.
- Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.
- Перед началом использования изделия необходимо снять с подушки наволочку и постирать ее.
- Пенополиуретан — дышащий материал, который может впитать посторонние запахи при транспортировке, хранении, использовании. В случае выявления запаха, необходимо проветрить подушку на свежем воздухе в течение 24 часов.
- Для предотвращения деформации подушку нужно использовать на ровной поверхности, не скручивать, не складывать.
- Срок службы подушки — не менее полутора лет.
- При использовании подушки свыше срока службы, возможна деформация формы и снижение оказываемого лечебного эффекта.
- Эксплуатация согласно инструкции обеспечит максимально эффективное и безопасное использование подушки BAMBINI.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей.

Способ утилизации

Вместе с бытовым мусором.

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Подушка TRELAX под голову
для детей (от 1,5 до 3 лет),
арт. П22, BAMBINI**

ТУ 8599-005-88419706-2011

Аттестация по Высшей категории качества с правом маркировки продукции знаком «Аттестат качества» сроком на 2 года № 02-04-019 от 19.06.2013 г.

Сертификат соответствия № SSAQ 001.3.2.0031, удостоверяющий систему менеджмента качества применительно к разработке и производству ортопедических изделий. Соответствует требованиям ГОСТ ISO 13485:2011 «Изделия медицинские. Система менеджмента качества. Системные требования для целей регулирования»



Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.AB45.B00518
(с 03.07.2013 г. по 02.07.2018 г.)

Рекомендуем



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ПОД ГОЛОВУ СТАНДАРТНАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 3-Х ЛЕТ TRELAX ОПТИМА BABY

используется для профилактики заболеваний шеи, формирования и поддержания правильного изгиба шейного отдела позвоночника, в период реабилитации после травм шейного отдела позвоночника, при повышенном тонусе мышц шеи и верхней части спины (включая кривошею), в случае нестабильности позвонков шейного отдела позвоночника, при наличии признаков остеохондроза в детском и подростковом возрасте. Подушка предназначена для использования детьми с длиной надплечья от 7 до 9 см.



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ПОД ГОЛОВУ ДЕТСКАЯ (ДО 1,5 ЛЕТ) TRELAX SWEET

мягко поддерживает голову и шею ребенка, уменьшает нагрузку на шейный отдел во время отдыха и сна, массирует мышцы шеи, способствует улучшению кровообращения мозга, делает сон ребенка легким и спокойным. Рекомендована для использования с 5-ти месяцев.

Рекомендуем



ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ МАТРАЦ TRELAX ДЛЯ ДЕТЕЙ

способствует правильному развитию опорно-двигательного аппарата ребенка, предупреждает развитие нарушений осанки, сколиозов. Ежедневное применение ортопедических матрасов для детей обеспечивает нормальное положение позвонков и нормализует мышечный тонус, предотвращает развитие гипертонуса мышц.



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА-КОНСТРУКТОР TRELAX BABY COMFORT

обеспечивает правильное положение позвоночника ребенка во время сна и кормления, предотвращает травмы и падения. Подушка BABY COMFORT способствует правильному формированию изгибов позвоночного столба, с младенческого возраста предотвращает развитие сколиоза.



Производитель:
ООО «ТРЕЛАКС»

Россия, 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 5, стр. 4

www.trelaxorto.ru