



KINERAPY

ADVANCED REHABILITATION TECHNIQUES

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Палки для скандинавской ходьбы KINERAPY



Сертификат соответствия № РОСС DE.MH08.H27329 (с 14.07.2015 г. по 13.07.2016 г.) выдан ООО «Промтест»

Система управления качеством сертифицирована в соответствии со стандартом EN ISO 13485.

Изготовитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 1.

Претензии принимает представитель в России и СНГ – ООО «НИКАМЕД» по адресу: Россия, 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2, телефон: +7 (499) 257-45-81.

Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я № 58.

www.kinerapy.com

www.nikamed.ru

Арт.: INTKK-RW-N1_10/15

Уважаемый покупатель!

Вы приобрели изделие торговой марки KINERAPY, изготовленное в соответствии со стандартами Германии и директивами ЕС, обеспечивающими высокое качество и надёжность изделий.

Для эффективной эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами использования изделий.

Область и способ применения:

Палки предназначены для специального вида ходьбы, называемой Скандинавская Ходьба или Северная Ходьба, или Nordic Walking.

Конструкция:

Телескопическая конструкция из двух секций позволяет регулировать высоту от 80 до 135 см. Вес одной палки 250 грамм.


Рукоятка из пластика с пробковым покрытием предотвращает скольжение кисти. Съёмный темляк (полуперчатка) для левой руки обозначен буквой L, для правой руки буквой R. Темляки регулируются по объёму с помощью велкро-застёжки.

Съёмные резиновые наконечники (башмачки) надеваются при хождении по асфальту.

Правила подбора:

Палки для скандинавской ходьбы KINERAPY имеют универсальный размер и подходят для пользователей ростом от 140 до 200 см.

Внимание! Перед приобретением палок необходимо примерить темляки. Темляк должен застёгиваться на руке и не иметь точек сдавливания.

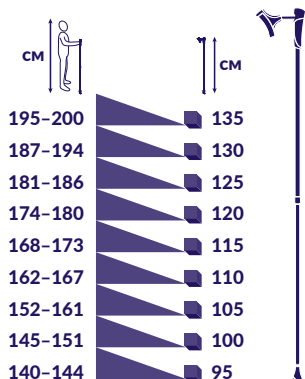

Правила использования:

Отрегулируйте высоту палки в соответствии с рекомендациями инструктора по Скандинавской Ходьбе, который определит Ваш индивидуальный тренировочный режим.

При самостоятельном выборе высоты палок предлагаем схему подбора в зависимости от роста пользователя.

Наденьте темляки — правый на правую руку и левый на левую руку. Вставьте фиксатор темляка в рукоятку и убедитесь, что темляки прочно закреплены.

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

Состав: Палки из алюминиевой трубки, рукоятка из пластика с пробковым покрытием, стальной наконечник, темляки из неопрена, наконечники (сменные насадки) из резины, чехол из терилена.

Комплектность:

Палки – 2 шт.

Темляки (правый и левый) – 2 шт.

Съёмные резиновые башмачки – 2 шт.

Чехол – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

Правила ухода:

Трубку и наконечник очищают от загрязнений с помощью чистой мягкой ткани. Для чистки трубки не используйте абразивные средства и щётки.

Информация о правилах эффективного и безопасного использования:

Не рекомендуется использовать палки без резинового башмачка при хождении по поверхностям с асфальтовым покрытием или мощёным плиткой.

Гарантийный срок:

6 месяцев со дня продажи.

Гарантийными случаями не являются:

- износ стальных штырей, резиновых башмачков, темляков, чехла;
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- не гарантийный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Срок службы:

2 года.

Срок годности:

Срок годности не установлен.

Правила хранения:

Храните изделия в сухом чистом виде при температуре от -20°C до +35°C. Для хранения и транспортировки палок используйте чехол.

Правила утилизации:

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Утилизировать с бытовым мусором.